

# 性能测试报告

编写：\_\_\_\_\_

校对：\_\_\_\_\_

审核：\_\_\_\_\_

标审：\_\_\_\_\_

批准：\_\_\_\_\_

北京迎风知至科技有限公司

2026-06-30

## 有效性声明

1. 本报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 纸质报告需加盖骑缝章。
3. 复制本报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
4. 本报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 本报告涂改无效。
6. 为了客户的利益，若对本报告有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本检验机构提出。
7. 本检验报告仅对被检样品及所检项目负责；本检验报告中样品来源信息（如送样人、产地、生产单位等）为客户提供，本检验机构不负责其真实性。
8. 未经本检验机构书面批准不得复制本报告。

单位名称：

单位地址：

单位电话：

Email：

## 测试基本信息

|           |  |     |  |
|-----------|--|-----|--|
| 软件名称      |  | 版本号 |  |
| 样品编号      |  |     |  |
| 送测物品      |  |     |  |
| 送测物品状态及特性 |  |     |  |
| 接收日期      |  |     |  |
| 测试日期      |  |     |  |
| 测试依据      |  |     |  |
| 测试方法      |  |     |  |
| 测试地点      |  |     |  |

## 环境配置信息

| 序号 | 设备名称 | 硬件配置（包括处理器、核数、内存、硬盘、网卡） | 软件配置（包括操作系统、被测软件/测试软件及版本） | 标识（包括设备编号、IP 地址等） | 用途及备注 |
|----|------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| 1  |      |                         |                           |                   |       |

仅限个人评估使用

## 测试环境拓扑图

仅限个人评估使用



患者流程

报告日期: 2026-06-30

## 测 试 概 述

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 开始时间                      | 2026-06-30 21:26:32 |
| 结束时间                      | 2026-06-30 21:29:32 |
| 测试时长 (秒)                  | 180                 |
| 事务总数                      | 26782               |
| 每秒事务数(事务总数/测试时长)          | 148.79              |
| 请求总数                      | 62508               |
| 每秒请求数(请求总数/测试时长)          | 347.27              |
| 吞吐量(bytes)                | 21156758            |
| 吞吐率(吞吐量/测试时长, 单位:bytes/s) | 117537.54           |

【注】在计算每秒事务数、每秒请求数、吞吐率时，需将测试时长转换为秒。

## 请求详情

标题: 请求详情

任务名称: 患者流程

测试时长: 180(s)

| 请求方法      | 名称                                           | 成功数   | 失败数 | 最小响应时间<br>(ms) | 最大响应时间<br>(ms) | 平均响应时间<br>(ms) | 平均数据大小<br>(bytes) | RPS    | 标准差<br>(ms) |
|-----------|----------------------------------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------|-------------|
| GET       | http://localhost:5173/api/patient/info       | 26793 | 0   | 2.23           | 461.01         | 20.62          | 281.0             | 173.1  | 20.6        |
| POST      | http://localhost:5173/api/patient/login      | 8939  | 0   | 2.74           | 20375.05       | 46.61          | 49.0              | 57.75  | 710.74      |
| GET       | http://localhost:5173/api/registration/list  | 8922  | 0   | 3.28           | 20017.14       | 25.66          | 311.0             | 57.64  | 213.1       |
| GET       | http://localhost:5173/api/registration/slots | 8920  | 0   | 4.19           | 567.74         | 27.11          | 695.0             | 57.63  | 28.74       |
| POST      | http://localhost:5173/api/triage/consult     | 8934  | 0   | 8.18           | 1152.09        | 50.02          | 471.88            | 57.72  | 60.29       |
| Aggregate | d                                            | 62508 | 0   | 2.23           | 20375.05       | 30.18          | 338.46            | 403.84 | 282.28      |

## 事务详情

标题: 事务详情

任务名称: 患者流程

测试时长: 180(s)

| 名称                    | 成功数  | 失败数 | 最小响应时间<br>(ms) | 最大响应时间<br>(ms) | 平均响应时间<br>(ms) | T50<br>(ms) | T90<br>(ms) | TPS   | 标准差<br>(ms) |
|-----------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| huanzh<br>edengl<br>u | 8938 | 0   | 5.17           | 20586.2<br>1   | 68.69          | 35          | 67.81       | 48.79 | 716.39      |
| Alfenz<br>hen         | 8924 | 0   | 13.67          | 1736.23        | 89.85          | 70          | 141.72      | 48.71 | 79.73       |
| guahao                | 8920 | 0   | 7.76           | 20023.5<br>1   | 52.77          | 40          | 80.23       | 48.69 | 216.1       |



## 自定义指标详情

| 名称                                                   | 成功数 | 失败数 | 最小响应时间 (ms) | 最大响应时间 (ms) | 平均响应时间 (ms) | T50 (ms) | T90 (ms) | RPS  | 标准差 (ms) |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|----------|----------|------|----------|
| http://localhost:5173/api/patient/info(stream)       | 845 | 0   | 2.41        | 446.58      | 37.92       | 26.91    | 72.13    | 5.46 | 49.01    |
| http://localhost:5173/api/patient/login(stream)      | 330 | 0   | 3.31        | 20375.05    | 714.49      | 30.73    | 95.99    | 2.13 | 3634.14  |
| http://localhost:5173/api/registration/list(stream)  | 289 | 0   | 3.56        | 20017.14    | 108.14      | 28.88    | 88.33    | 1.87 | 1174.0   |
| http://localhost:5173/api/registration/slots(stream) | 362 | 0   | 4.46        | 529.17      | 56.94       | 39.49    | 107.84   | 2.34 | 67.61    |
| http://localhost:5173/api/triage/consult(stream)     | 318 | 0   | 9.32        | 1152.09     | 128.22      | 87.25    | 231.23   | 2.05 | 151.08   |

## SLA（服务等级协议）配置

配置名称：

是否启用：否

| 指标名称 | 最大值 | 最小值 | 行为 |
|------|-----|-----|----|
|------|-----|-----|----|

仅限个人评估使用

## SLA（服务等级协议）告警列表


| 指标名称 | 最大值 | 最小值 | 行为 | 发生次数 |
|------|-----|-----|----|------|
|------|-----|-----|----|------|

仅限个人评估使用

## 性能监控图

Leming WebRunner应用系统性能测试工具/患者流程 - 2026-06-30 21:26:32


虚拟用户 指标分析 日志列表 报告定制 报告导出 数据下载

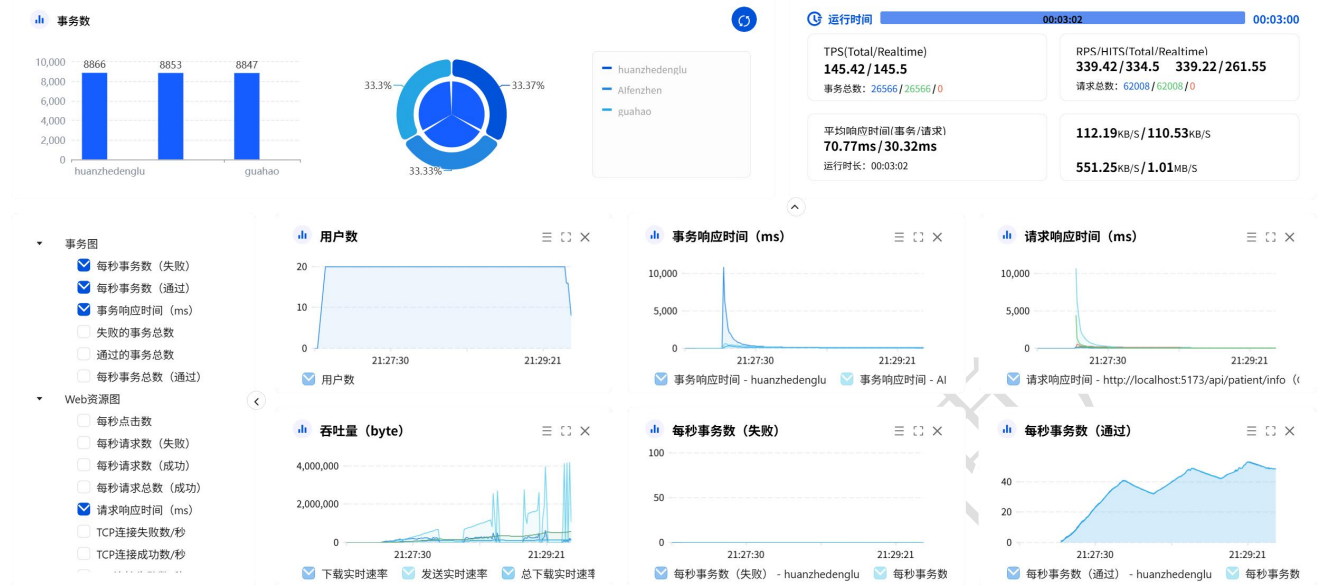


## 用户数




### 事务响应时间 (ms)

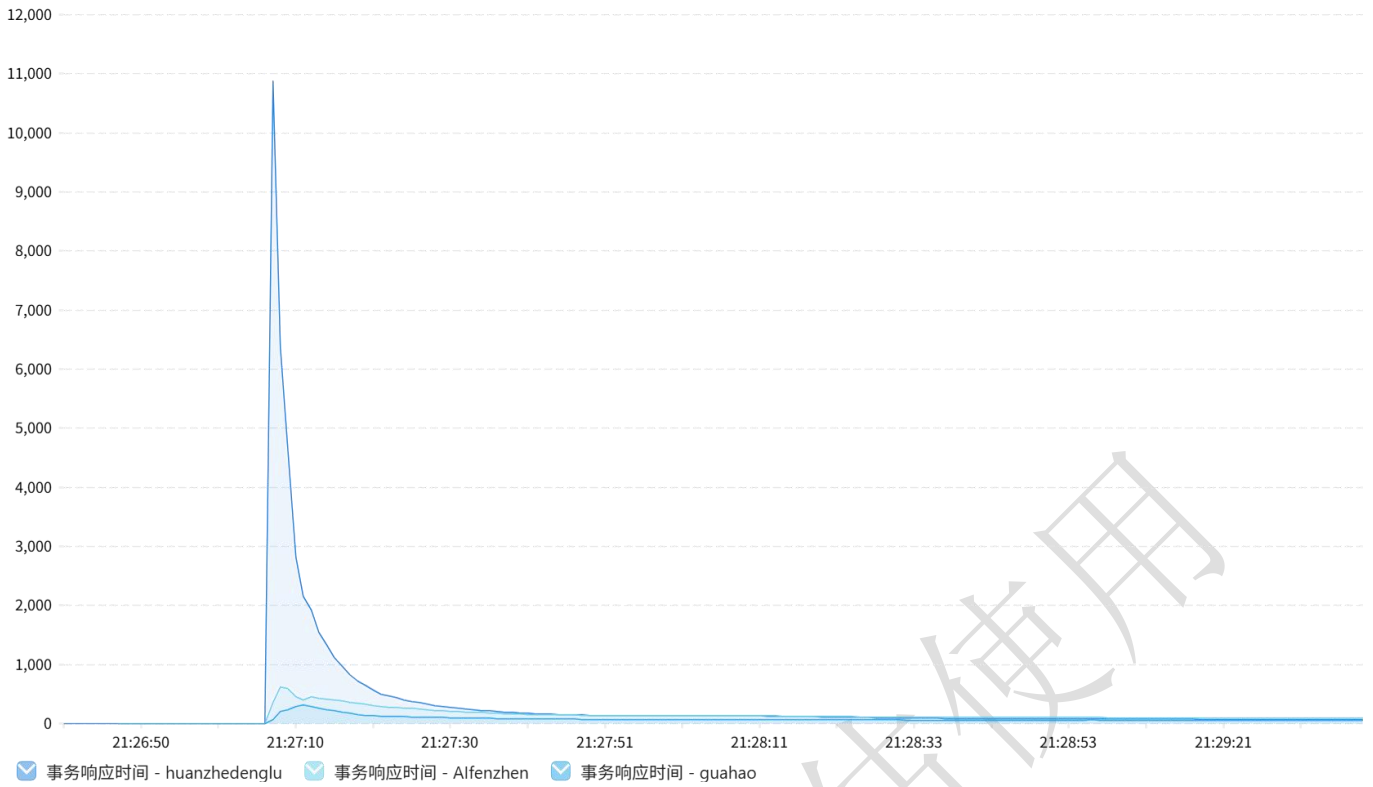


### 请求响应时间 (ms)

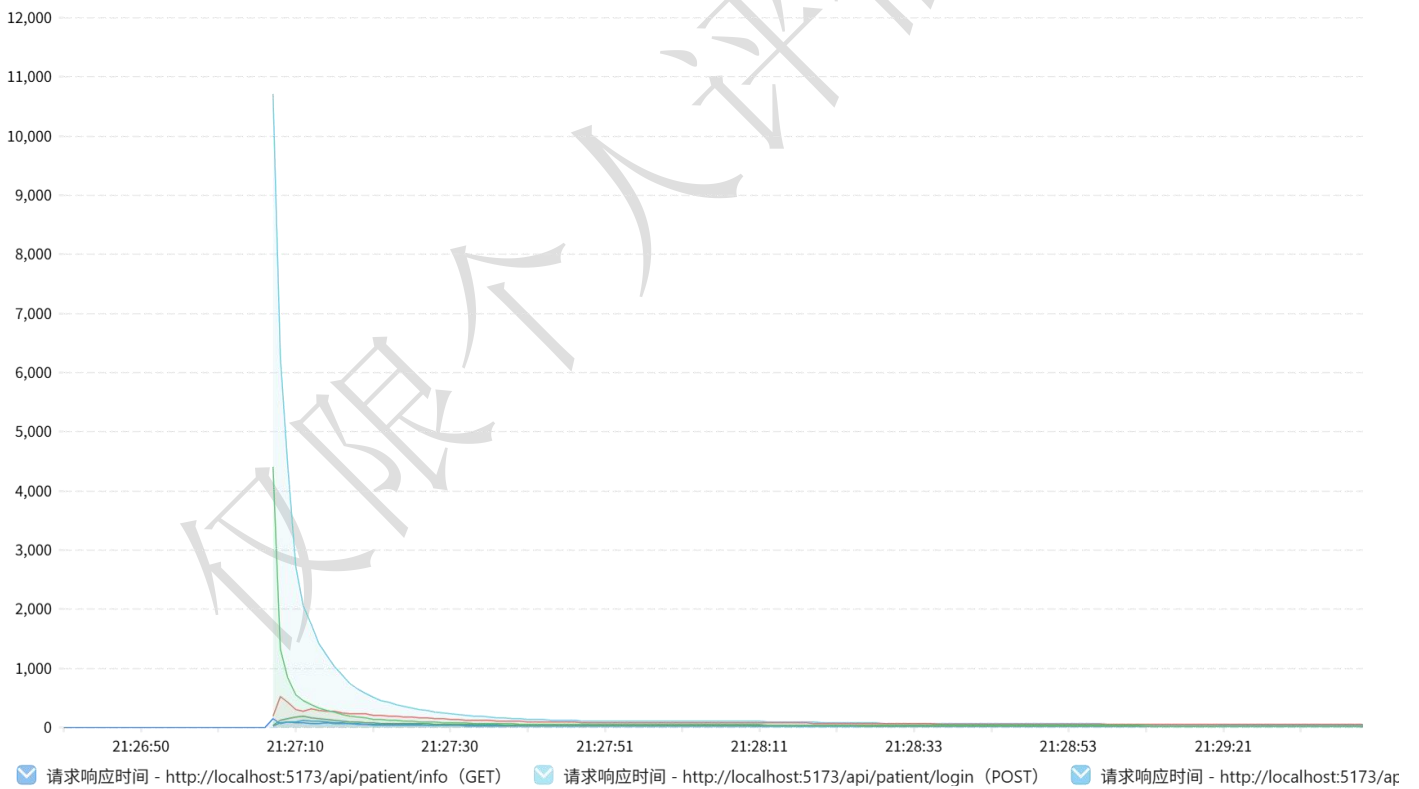

吞吐量 (byte)

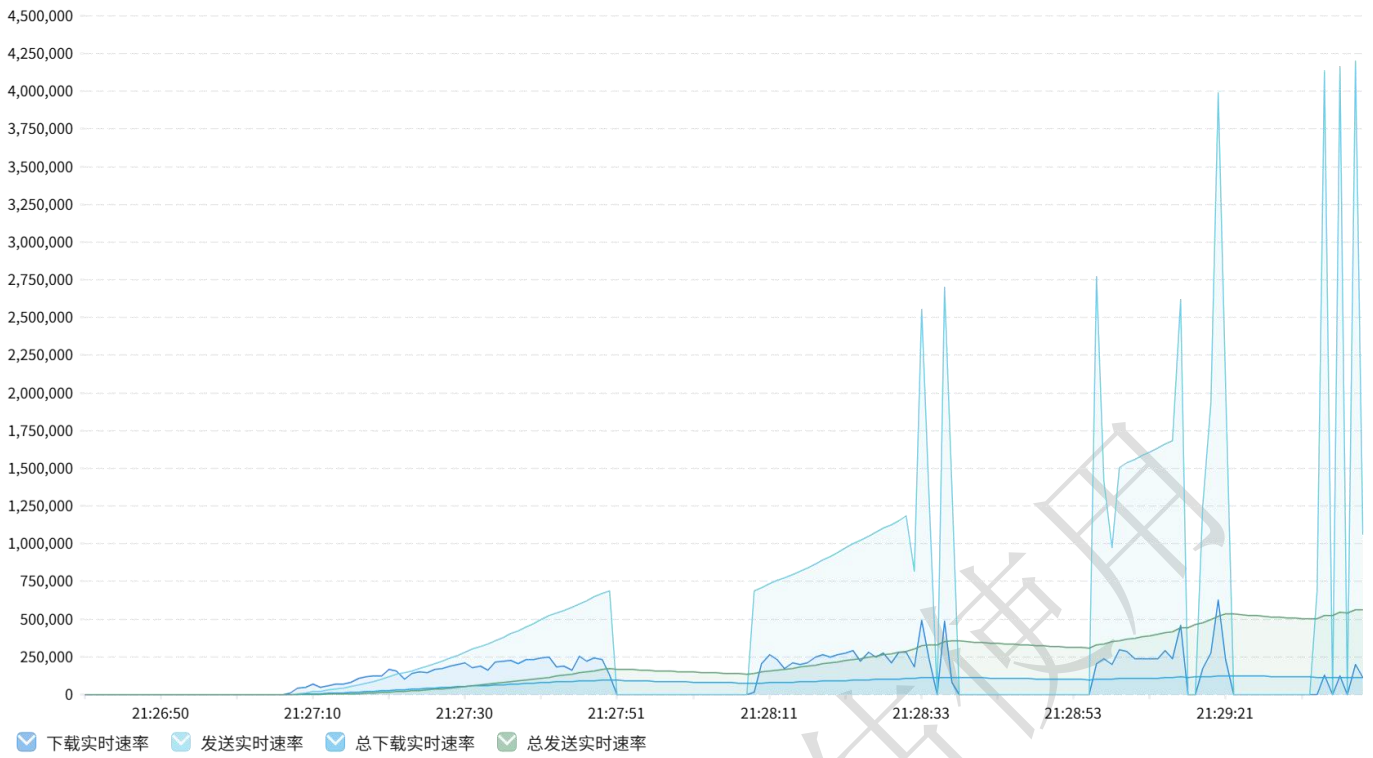

每秒事务数 (失败)

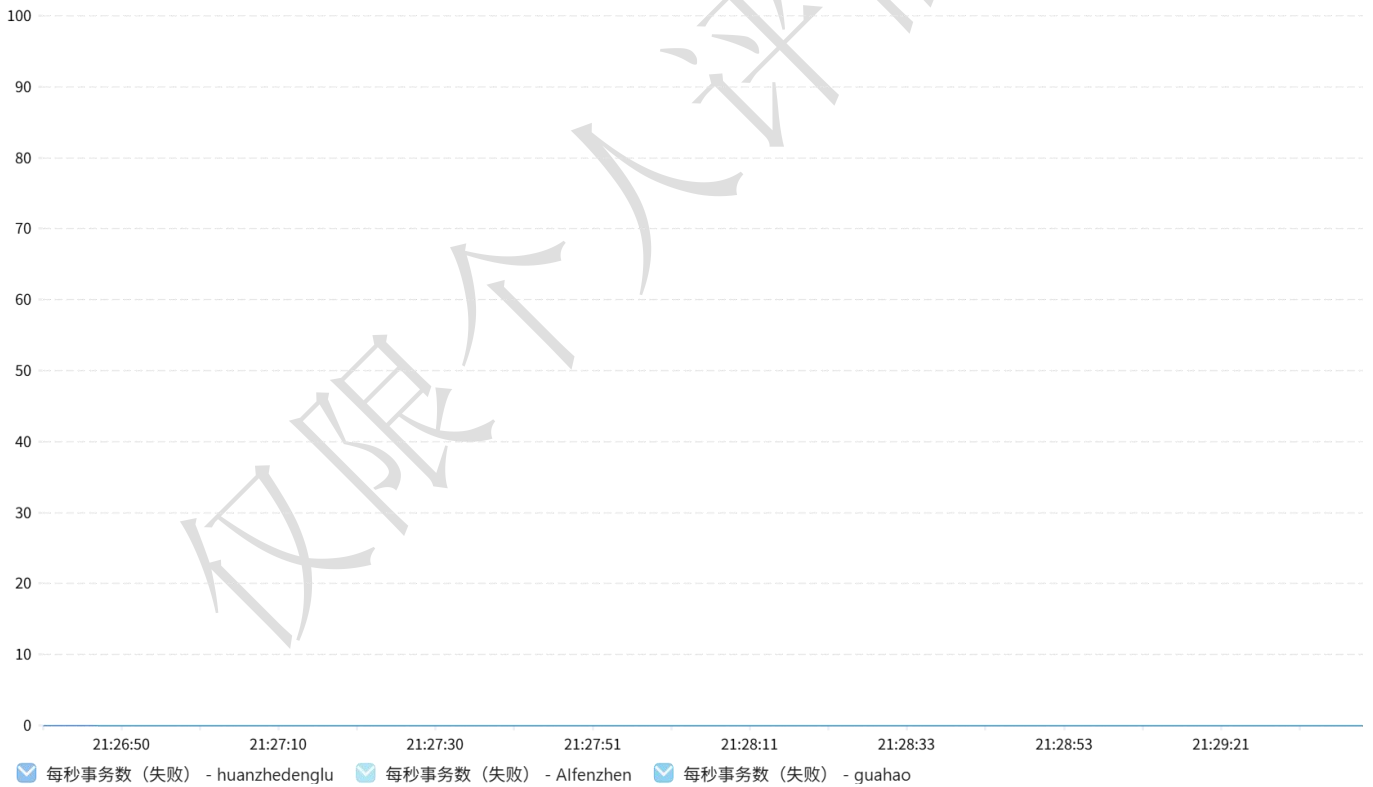

每秒事务数 (通过)

